


Daten hochladen und mit der Praxis teilen - Dexcom Clarity

Erstmaliges Hochladen der Daten

- 1.) Link öffnen: clarity.dexcom.eu (ganz wichtig: .eu, nicht .com)
- 2.) Sprache auf „Deutsch“ ändern
- 3.) „Dexcom Clarity für Heimanwender“ auswählen
- 4.) Benutzername und Passwort erstellen (Bildschirmanweisungen folgen)
- 5.) Auf das Feld „Upload-Anweisungen“ (recht unauffällig in der linken oberen Ecke) klicken
- 6.) Installieren des Uploaders => unter Schritt 1 auf „Herunterladen“ klicken und den Bildschirmanweisungen folgen
- 7.) Dexcom Empfänger anschließen und den Bildschirmanweisungen folgen

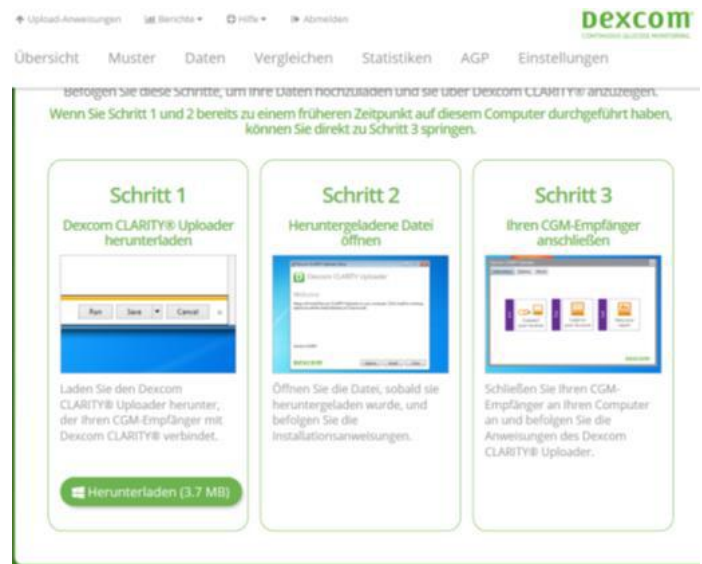

Hochladen der Daten, nachdem die Ersteinrichtung bereits erfolgt ist:

- 1.) Lediglich den Dexcom Empfänger über das mitgelieferte USB-Kabel mit dem Computer verbinden
- 2.) Der Uploader startet automatisch
- 3.) Ggf. ist eine Anmeldung mit Benutzername und Passwort nötig

Bei Nutzung der Dexcom G5 oder G6 App werden die Daten automatisch in die Cloud und die Dexcom Clarity Software übertragen (mit 3-stündiger Verzögerung)

Daten mit der Praxis teilen

- 1.) Patient wird von der Praxis eingeladen und erhält einen Freigabecode
- 2.) Nach Anmeldung in der Clarity – Software mit Benutzername und Passwort auf „Einstellungen „ klicken
- 3.) Auf dieser Seite ganz unter bei „Datenfreigabe mit Kliniken“ auf „+Daten mit einer neuen Klinik teilen“ klicken
- 4.) Auf der folgenden Seite Freigabecode eingeben und Geburtsdatum bestätigen, dann auf „Weiter“ klicken